

版本号: 24072023

金黄色葡萄球菌肠毒素 E (SEE 肠毒素)

产品简介:

金黄色葡萄球菌肠毒素 E, 能够有效增强共培养时刺激激活 Jurkat 的 IL2 分泌量。

试剂盒包装清单和储存条件:


货号	试剂名	保存条件	规格	数量	有效期
GM-H23036	金黄色葡萄球菌肠毒素 (SEE 肠毒素)	-20°C	1 µg (100 µL)	1 管	12 个月

使用方法:

使用前需先解冻至室温, 使用无菌去离子水或基础培养基 (含 5% BSA 和 1% FBS, 可以使 SEE 更稳定) 稀释到使用浓度, 再进行下游实验。

货号	名称	推荐 SEE 终浓度
GM-032AS002	H_TIGIT /CD155 Reporter Blockade Assay	0.3 ng/mL
GM-032AS005	H_PD-1 PDL1 Reporter Blockade Assay (CHO-aAPC)	5 ng/mL
GM-C20096	H_LAG3 Reporter Jurkat Cell Line	0.1 ng/mL

验证结果示例:

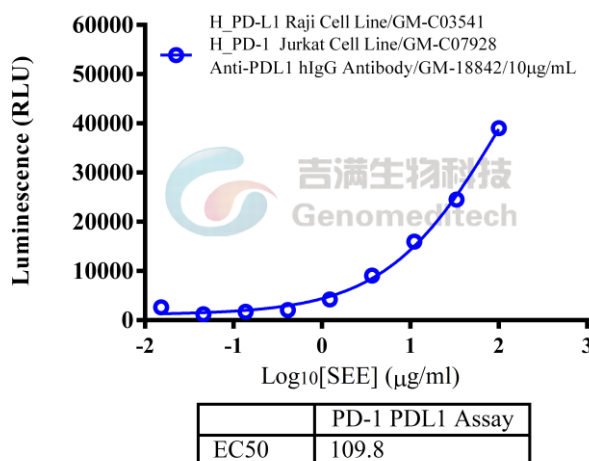

注意事项:

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书全文。
2. 整个实验, 应规范操作包括反应体系的配制、样本处理及加样。
3. 为了您的健康, 实验操作时请穿实验服和带一次性手套。
4. 不同批次之间略有差异, 实验前请进行浓度预实验。